




# Kiilto Pro Erinox

## Specialrengøring

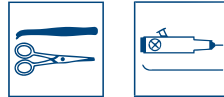

Lavtskummende rengøringsmiddel til manuel rengøring af instrumenter og udstyr samt til anvendelse i ultralydsbade.

<b>Anvendelsesområde</b>	Til rengøring af kirurgiske instrumenter inden desinfektion, herunder fleksible og stive endoskoper, sarte og følsomme instrumenter der anvendes i sundhedssektoren og dentalbranchen samt til skrøbeligt glas og laboratorieudstyr. Anvendes manuelt eller i ultralydsrensere.  Medicinsk udstyr til professionel brug.
<b>Produktegenskaber</b>	Lavtskummende rengøringsmiddel specielt udviklet til skånsom rengøring af følsomme instrumenter. Fjerner effektivt organisk materiale som fedtsmuds og kropsvæsker. Også effektivt til instrumenter og udstyr med små hulrum. Kan anvendes på de fleste materialer som aluminium, glas og plastic.
<b>Brugsanvisning</b>	Lav en opløsning af Erinox specialrengøring i henhold til anvisningen.  Manuel rengøring: Rengør instrumenterne grundigt, iblødsætning ved behov. Skift opløsning efter hver rengøring. Skyl instrumenterne med rent vand efter rengøring og tør dem.  Ultralydsrensere: Placer instrumenterne løst i ultralydsrenseren. Skyl instrumenterne med rent vand efter vask. Desinficer instrumenterne efterfølgende ved behov.

Brugsanvisning	Opløsning	Erinox	Vand	Bemærkning
Ultralydsrensere	1 -2%	10-20 ml	1 liter	Udskift opløsningen 1-2 gange dagligt Iblødsætning 2% ved behov
Manual rengøring:				
Endoskoper	2%	20 ml	1 liter	
Andre instrumenter og udstyr	1-2%	10-20 ml	1 liter	Udskift opløsning efter hver rengøring
Meget snavsede instrumenter	5%	50 ml	950 ml	

Indhold	Ingrediens	Effekt
	Nonioniske overfladeaktive stoffer < 5%	Vaskeaktivt stof, opløser snavs
	Polycarboxylat <5%	Rengørende effekt, opløser snavs og binder det til vandet
<b>pH produkt</b>	10.0	
<b>pH brugsopløsning</b>	10.0	
<b>Opbevaring</b>	Opbevares ved 5-35°C. Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato.	
<b>Udseende og duft</b>	Klar væske.	
<b>Produktionsland</b>	FINLAND	
<b>Anvendelses- og miljø sikkerhed</b>	<p>Alvorlige hændelser i forbindelse med produktet skal rapporteres til asiakaspalvelu@kiilto.com og den lokale myndighed for medicinsk udstyr (Lægemiddelstyrelsen).</p> <p>Læs brugsanvisning før brug. Sikkerhedsinstruktioner findes på produktets sikkerhedsdatablad.</p>	
<b>Emballagematerialer</b>	Emballagen er fremstillet af HDPE plast, som er et genanvendeligt materiale.	

Forpackingsstørrelse / Varenummer	Salgsenhed	Varenummer	GTIN	GTIN (salgsenhed)
6 x 1 l		8113	6417964081138	6417964483536
3 x 5 l		8114	6417964081145	6417964483543



#### Øvrig information

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside [www.kiilto.dk](http://www.kiilto.dk) eller send en mail til kundeservice på [info.dk@kiilto.com](mailto:info.dk@kiilto.com).